

مقدمه

گسترش تکنولوژی در کلیه‌ی زمینه‌ها از بک سو و تغییرات بی‌دریبی در شیوه‌های زندگی و روابط انسانی از سوی دیگر، مسایل فراوانی را به بار آورده است. در چنین شرایطی، برنامه‌ها و روش‌های آموزش سنتی یارای پاسخگویی به نیازها را نداشته و از همگامی با تحولات شکرف زندگی امروز باز می‌ماند. در نیم قرن گذشته، رشد عظیم دانستنی‌ها (پدیده‌ای که به انفجار داشت معروف است)، موجب افزایش روزافزون حجم برنامه‌ها و کتاب‌های درسی شد. دانشمندان، محققان، روانشناسان و معلمان به این نتیجه رسیدند که راه حل این مسایل، باز شناختن نیازها، هدف‌ها، روش‌ها و کاربرد مفاهیم جدید یادگیری است.

دیران و هنرآموزان عزیز ما در حین آموزش دروس مختلف شیمی در رشته‌ی صنایع شیمیایی، باید این نکته را در نظر داشته باشند، که آموزش بر پرورش تقدّم عملی دارد، یعنی برورش بدون آموزش مطلوب، امکان‌پذیر نیست، لکن هدف نهایی، پرورش افراد با کیفیّت‌های مطلوب و مطابق با معیارهای اسلامی و انسانی است. امروزه در مقاطع تحصیلی پایین‌تر از دانشگاه، (به‌جز در موارد جزئی) آموزش خود هدف نیست، بلکه وسیله است و هر یک از دروس شیمی در رشته‌ی صنایع شیمیایی یکی از این ابزارهای است. یعنی هدف از آموزش شیمی در این رشته تربیت یک شیمیدان ماهر نیست، بلکه هر یک از دروس شیمی وسیله‌ای برای تبیین هدف‌های آموزشی است. با توجه به این موضوع از معلم انتظار می‌رود که به جای تأکید بر انتقال محتوا، با روش تدریس مناسب، هدف‌های تربیتی مورد نظر را تحقیق بخشد.

هدف‌های آموزش شیمی تجزیه نیز با توجه به اصول برنامه‌ریزی و با درنظر گرفتن همین معیارها تنظیم شده و معلم ضمن تدریس باید همواره آن را مورد توجه قرار دهد.

هدف کلی

درک صحیح مفاهیم شیمی تجزیه‌ی کیفی و کمی و مبانی تجربی آن در راستای صنایع شیمیایی و برخی از تکنولوژی‌های وابسته و کسب مهارت‌های لازم اولیه برای کار در آزمایشگاه‌های کارخانه‌های صنایع شیمیایی.



نمونه‌برداری، محاسبه و خطا

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود، بعد از انجام آزمایش‌های این فصل بتواند :

- ۱- نمونه‌برداری را انجام دهد.
- ۲- خطای شخصی و دستگاهی را در آزمایش تعیین کند.
- ۳- اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک نمونه‌ی حقیقی ناخالص را جدا کند.
- ۴- محاسبات وزنی را در آزمایش انجام دهد.

اطمینان حاصل شود که ترکیب نمونه ثابت‌مانده و همچنان نماینده‌ی ماده‌ی اصلی است (به عبارت ساده‌تر، مشت نمونه‌ی خروار است).

مواد لازم

کات کبود (مس (II)) سولفات پنتا هیدرات یا زاج آبی^۱). به شکل ۱-۱ توجه کنید (ممکن است آب تبلور این ترکیب کم‌تر از ۵ باشد. زیرا ممکن است بر اثر گرمای موجود در آزمایشگاه، مقداری از آب تبلور خود را از دست داده باشد.)

ابزار لازم

۱- شیشه‌ی ساعت

۲- قاشقک (اسپاتول^۲)

۳- ترازوی دقیق

۴- هاون چینی یا آسیاب برقی

روش کار^۳: مقدار ۰.۱ کات کبود (زاج آبی) را وزن

کرده آن گاه به وسیله‌ی هاون چینی یا آسیاب برقی، آن را نرم نمایید. از این نمونه‌ی بزرگ، روی شیشه‌ی ساعت توده‌ی مخروطی شکلی ایجاد نمایید. سپس رأس مخروط را مسطح نموده تا توده‌ی مخروطی به شکل لایه‌ی مدوری درآید. این دایره را با دو قطر عمود بر هم به چهار قسمت تقسیم نمایید. دو قسمت رباعی را کنار گذاشته و با دو قسمت رباعی باقیمانده دوباره مخروطی ایجاد نمایید. این عمل را تکرار نمایید تا نمونه‌ای به وزن حدود

آزمایش ۱-۱- نمونه‌برداری^۱

هدف: آشنایی با نمونه‌برداری در شیمی تجزیه

به طور کلی، تجزیه‌ی شیمیایی بر روی قسمتی از ماده که ترکیب نسبی آن مورد توجه است، انجام می‌شود. برای اینکه یک تجزیه‌ی شیمیایی دارای ارزش علمی باشد، باید ترکیب این قسمت از ماده حتی المقدور با ترکیب کلی توده‌ی بزرگ نمونه‌ی مورد آزمایش یکی باشد. برداشتن قسمتی از نمونه، که خواص کل ماده را داشته باشد، نمونه‌برداری نامیده می‌شود.

در اغلب موارد، نمونه‌برداری مشکل‌ترین مرحله‌ی کل فرایند تجزیه است. این ادعا بویژه وقتی صدق می‌کند که ماده که مورد نمونه‌برداری یک کالای تجاری، چند تن وزن داشته باشد. برای مواد ناهمگن، نمونه‌ی بزرگ می‌تواند چند صد کیلوگرم یا بیشتر باشد. قبل از اینکه نمونه به آزمایشگاه منتقل شود، وزن آن را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند. چرا که در آزمایشگاه بالاترین وزن مناسب برای جابه‌جایی و کار کردن، بندرت چند کیلوگرم می‌باشد.

فرایند کاستن مقدار نمونه معمولاً در چند مرحله انجام می‌شود و نمونه ۱۰۰ مرتبه یا حتی بیشتر، کوچک می‌شود؛ این کار، نیاز به تکرار اعمال آسیاب کردن، اختلاط و تقسیم دارد. با کم ترشدن وزن نمونه، اندازه‌ی ذرات آن نیز کوچک‌تر می‌شود تا

- ۲- آب مقطّر
- ۳- محلول آب آهک ابزار لازم
- ۱- ارلن ۲۵۰mL
- ۲- بشر ۲۵۰mL
- ۳- همزن شیشه‌ای
- ۴- کاغذ صافی
- ۵- قیف شیشه‌ای

روش کار: مقدار ۲g سود را در ۹۸g آب مقطّر، که در دمای آزمایشگاه تقریباً برابر با ۹۸mL است، در یک بشر ۲۵۰mL حل نمایید (با چه تدبیری می‌توان به گرمایش بودن یا گرماده بودن انحلال سود در آب بی برد؟) اگر در این محلول بدمید یا بگذارید مدتی با در باز بماند، گاز کربن‌دی‌اسید موجود در هوای بازدم شما یا هوا با محلول سود واکنش نشان داده و مقداری از آن را به سدیم کربنات، Na_2CO_3 ، تبدیل می‌کند. سرانجام اگر عمل ادامه یابد، بعد از مدتی احتمالاً سدیم ئیدروژن کربنات هم، NaHCO_3 (جوش شیرین)، به دست خواهد آمد. بنابراین، این محلول سود در آب که یک محلول حقیقی می‌باشد، نسبت به سدیم هیدروکسید ناخالص است.

برای تشخیص اینکه این محلول حقیقی سود خالص می‌باشد، حدود ۱۰mL از آن را در یک لوله‌ی آزمایش بریزید. قبلایک چوب پنبه را که در آن یک لوله‌ی رابط قرار داده‌اید آمده کنید. سپس چند قطره محلول غلیظ هیدروکلریک اسید به لوله‌ی آزمایش اضافه کنید و فوری در آن را با چوب پنبه‌ای که لوله‌ی رابط در آن قرار دارد، بیندید و لوله‌ی رابط را درون لوله‌ی آزمایشی که آب آهک $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ، در آن وجود دارد، فرو برد. در این صورت، گاز CO_2 تولید شده موجب کدر شدن آب آهک می‌شود. بدلیل تشکیل رسوب سفید کلسیم کربنات، CaCO_3 ، این محلول کدر می‌شود.

۵/ گرم به دست آید. نمونه‌ی حاصل را به طور دقیق وزن کنید. این آزمایش را یکبار با ۱۰g نمک طعام و بار دیگر با ۱۰g پودر لباسشویی انجام دهید.



(الف)



(ب)

شکل ۱-۱-الف- بلورهای آبی مس (II) سولفات، $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$.. ب- این بلورها وقتی گرم شوند آب بلور خود را از دست می‌دهند تا جایی که تقریباً جامد خالص سفیدرنگ CuSO_4 باقی بماند.

آزمایش ۲-۱- شناسایی یک محلول حقیقی ناخالص
هدف: نشان دادن یک نمونه محلول شیمیایی ناخالص

مواد لازم

- ۱- سدیم هیدروکسید

پرسش و تمرین

- ۱- غلظت درصد محلول اولیه‌ی سود را تعیین کنید.
- ۲- پس از واکنش گاز CO_2 با محلول سود، آیا غلظت محلول سود تغییر خواهد کرد یا نه؟ چگونه؟
- ۳- انحلال سود در آب گرماده می‌باشد یا گرمایش؟ با دماسنیج آزمایش و نتیجه را گزارش نمایید.
- ۴- اگر انحلال سود در آب گرماده باشد، برای تسريع انحلال سود در آب، چه باید کرد؟ با ذکر دلیل و توجه به اصل لوشاتلیه، توضیح دهید.
- ۵- معادلات واکنش‌های انجام شده را بنویسید.

حال این نمونه را در یک اrlen مایر 25°mL بروزید. با یک استوانه‌ی مدرج 25mL مقدار 20mL محلول هیدروکلریک اسید 3M به آن بیفزاید و در صورت لزوم حرارت دهید. چنانچه حجم محلول بر اثر گرم کردن کم شد، 1° الی 2° میلی لیتر آب مقطر به آن اضافه کنید و در صورت نیاز چند mL محلول HCl 3M به آن بیفزاید. در این صورت به دلیل اینکه فقط فلز روی در هیدروکلریک اسید حل شده است فلز مس پس از پایان واکنش به حالت جامد، در محلوت باقی می‌ماند. بعد از پایان واکنش، حجم محلوت را با آب مقطر به 100mL برسانید.

مخلوط واکنش را بعد از سرد کردن مطابق شکل ۱-۲ صاف نمایید. بعد از صاف کردن، فلز مس روی کاغذ صافی را دوبار و هر بار با 5mL آب مقطر بشویید. برای اینکه فلز مس زودتر خشک شود، 5mL استون روی کاغذ صافی اضافه نمایید (چرا؟ فکر کنید و پاسخ دهید). سپس به مدت ۵ دقیقه آن را در خشک کن^۱، که دمای آن تا $C^{\circ} 50$ تنظیم شده است، قرار دهید تا خشک شود. اگر فلز مس مدت زیادی در خشک کن بماند یا اگر دمای آن بالا باشد، امکان دارد فلز مس قرمز رنگ به مس (I) اکسید قرمز رنگ، Cu_2O ، تبدیل شود. در این صورت، فلز مس به دست آمده ناخالص خواهد بود. بعد از خشک شدن، فلز مس را وزن کرده و از آنجا درصد فلز مس را در آلیاز به دست آورید. روش محاسبه به شرح زیر است:

$$\frac{\text{وزن مس}}{\text{وزن کل آلیاز}} \times 100 = \text{مس \%}$$

۱-۳ تعیین درصد اجزای یک نمونه‌ی حقیقی

هدف: آزمایش تعیین درصد اجزای یک نمونه مواد لازم

۱- آلیاز برنج یا محلوتی از براده‌ی مس و روی
۲- آب مقطر

۳- محلول هیدروکلریک اسید 3M

۴- استون

۵- ابزار لازم

۶- اrlen مایر 25°mL

۷- شیشه‌ی ساعت

۸- ترازوی دقیق تجزیه‌ای

۹- اسپاتول

۱۰- کاغذ صافی

۱۱- قیف شیشه‌ای

۱۲- همزن شیشه‌ای

روش کار: برنج آلیازی است که از سرد کردن محلوت دو فلز مذاب مس و روی به دست می‌آید. این آلیاز یک محلول جامد در جامد است. برای جدا کردن مس و روی و تعیین درصد مس در این آلیاز به شرح زیر عمل نمایید.

۱/۳ گرم از براده‌ی آلیاز برنج یا $1/3$ گرم محلوتی از براده‌ی روی و براده‌ی مس را که مسئول آزمایشگاه در اختیار شما قرار می‌دهد، به وسیله‌ی ظرف توزین در روی ترازوی دقیق تجزیه‌ای وزن کنید و از آن نمونه‌ای به وزن $4/40$ گرم تهیه نمایید.

این گونه خطای معین می‌شود.

۱-۴-۱- آزمایش مربوط به خطای شخصی در

تجزیه

مواد لازم

۱- نمک طعام

۲- گوگرد

۳- سدیم کربنات

ابزار لازم

۱- ترازوی دقیق

۲- اسپاتول

۳- شیشه‌ی ساعت یا کاغذ

هدف : بی بردن به خطای شخصی

روش کار: ۲ گرم از یک ترکیب جامد را به وسیله‌ی ترازوی دقیق آزمایشگاه وزن کنید. برای انجام آن یک ورقه‌ی کاغذ روی ترازو قرار داده، آن‌گاه به کمک اسپاتول ماده‌ی جامد را روی ورقه‌ی کاغذ روی ترازو قرار داده و ۲ گرم از آن را وزن کنید. به علت عدم دقّت شما امکان دارد وزن کاغذ نیز در وزن ترکیب جامد موردنظر منظور شده باشد. اگر وزن کاغذ $\frac{1}{25}$ گرم باشد، شما $\frac{1}{75}$ گرم ترکیب را به جای ۲ گرم وزن کرده‌اید. در این صورت خطای شخصی $\frac{1}{25} - \frac{1}{75} = \frac{1}{25}$ گرم خواهد بود که خطای مطلق است.

$$\text{خطای مطلق} = \frac{\text{خطای نسبی}}{\text{مقدار واقعی}} = \frac{12/5}{100} = \frac{-0/25}{-0/25} = \frac{12/5}{100}$$

و خطای نسبی بیش از حد است.

این آزمایش را ۵ بار به شرح زیر و برای هر مورد، توزین را دوبار تکرار کنید و از طریق مقایسه‌ی دوبار توزین خطای شخصی را تعیین کنید.

الف- با وزن کردن ۳ g سدیم کلرید

ب- با وزن کردن ۱ g سدیم کلرید

ج- با وزن کردن ۵ g سدیم کربنات

د- با وزن کردن ۲ g سدیم کربنات

ه- با وزن کردن ۱۶ g گوگرد



شکل ۲ - ۱

۴-۱- آزمایش‌های مربوط به خطای شخصی و دستگاهی

خطاهای شخصی، درنتیجه‌ی عدم دقّت یا بی احتیاطی و محدودیت‌های فیزیکی شخص آزمایش‌کننده، حاصل می‌شوند. به عنوان مثال این خطاهای ممکن است ناشی از موارد زیر باشد: به کارگیری یک شیوه‌ی نادرست در انتقال نمونه، نادیده گرفتن تصحیحات لازم در دما برای یک ابزار اندازه‌گیری، زیاد یا کم شستن یک رسوب، جایه‌جا نوشتن اعداد هنگام ثبت یک اندازه‌گیری تجربی یا به علت محدودیت فیزیکی شخص مثلاً مبتلا به کوررنگی که مشکلاتی در تشخیص تغییر رنگ‌های حائز اهمیت در تجزیه دارد.

خطاهای دستگاهی، مربوط به نقص ابزارهایی است که تجزیه‌کننده با آن‌ها کار می‌کند یا تأثیر عوامل محیطی بر این ابزارهای است. به عنوان مثال، وسایل وزن‌سنجی مانند ترازو و وسایل حجم‌سنجی نظیر بورت، پی‌پت، استوانه‌ی مدرج و بالن است که درجه‌بندی آن‌ها نشان می‌دهد، با در خود جای می‌دهند. بویژه هنگامی که در دماهای مورد استفاده قرار گیرند، به نحوه بارزی از دماهایی که در آن مدرج شده‌اند، متفاوت می‌باشند. روشن است که اندازه‌گیری در دمای مناسب باعث حذف

۱-۴-۲ آزمایش مربوط به خطای دستگاهی در به خطای دستگاهی می‌باشد، خطای نسبی را برای هر استوانه محاسبه نمایید.

این آزمایش را ۵ بار و هر بار به ترتیب با ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۲ mL آب مقطر تکرار کنید و خطای نسبی حاصل از هر مرحله را به دست آورید.

در آزمایش دیگر، ۲g نمک طعام را به وسیله‌ی ترازوی

یک کفه‌ای یا دو کفه‌ای موجود در آزمایشگاه وزن کنید. سپس این ۲ گرم نمک طعام را بروی ترازوی دقیق تجزیه‌ای آزمایشگاه قرار داده و وزن آن را به دست آورید. از طریق مقایسه، خطای نسبی دستگاهی مربوط به ترازوی یک کفه‌ای یا دو کفه‌ای را تعیین کنید. این آزمایش را ۳ بار و هر بار با ۱/۵ و ۱ گرم سدیم کلرید تکرار کرده و در هر مرحله خطای نسبی دستگاهی را به دست آورید.

تجزیه

مواد لازم

۱- آب مقطر

۲- نمک طعام

ابزار لازم

۱- استوانه‌ی مدرج ۵۰، ۲۵ و ۱۰۰ میلی‌لیتری

۲- بورت، پایه و گیره‌ی بورت

۳- ترازوی یک کفه‌ای یا دو کفه‌ای

۴- ترازوی دقیق تجزیه‌ای

هدف: آشنایی با خطای دستگاهی در شیمی تجزیه

روش کار: به هر کدام از استوانه‌های مدرج ۵۰، ۲۵ و

۱۰۰ میلی‌لیتری مقدار ۱۵ میلی‌لیتر آب مقطر با استفاده از بورت منتقل نمایید و درجه استوانه‌ها را بخوانید این تفاوت مربوط



تشخیص نوع فلزها (گروه اول و دوم جدول تناوبی) در شعله

هدف‌های رفتاری: از فرآگیر انتظار می‌رود بعد از انجام آزمایش‌های این فصل بتواند:

- از روی رنگ شعله، نوع فلز و یون‌های فلزی را در یک ترکیب تشخیص دهد.

۱-۲- نورسنجدی شعله‌ای^۱

نورسنجدی شعله‌ای، روشی است که با افشاردن محلولی از نمونه به داخل یک شعله‌ای داغ انجام می‌شود. مهم‌ترین موارد کاربرد نورسنجدی شعله‌ای در تشخیص سدیم و پتاسیم، مخصوصاً در بافت‌ها و سیالات زیستی بوده است.


- ۴- محلول HCl غلیظ
- ۱- ابزار لازم
- ۱- شیشه‌ی ساعت
- ۲- میله‌ی پلاتین
- ۳- چراغ گاز بنسن
- ۴- قطره چکان

روش کار: مقداری (حدود ۵٪ گرم) از یک نمک جامد لیتیم روی شیشه‌ی ساعت بریزید. یک سیم پلاتینی که انتهای آن به شکل S پیچانده شده است و دارای سطح زیادی می‌باشد، بردارید و به وسیله‌ی قطره چکان چند قطره محلول هیدروکلریک اسید غلیظ در انتهای این سیم بریزید. سپس آن را در نمک لیتیم جامد موجود در روی شیشه‌ی ساعت فرو برید. آن‌گاه انتهای سیم پلاتینی (قسمت S) را در بالای شعله‌ی (منطقه‌ی اکسیدان) چراغ مطابق شکل ۲-۱ قرار دهید و به رنگ شعله توجه نمایید. براثر گرما، لیتیم کلرید بخار شده، تجزیه می‌شود و شعله را رنگی می‌کند. این آزمایش را برای ترکیبات سدیم و پتاسیم و سایر ترکیبات فلزهای قلیایی انجام دهید و مشاهدات خود را گزارش نمایید. رنگ حاصل از هر نمک را به دقت در نظر بگیرید این رنگ مربوط به یون فلزی موجود در آن نمک است.

۲-۲- تشخیص کانی‌ها (ترکیبات یونی) به وسیله‌ی مشاهده‌ی رنگ شعله
پودر برشی از کانی‌ها (ترکیبات معدنی یونی) بویژه آن‌هایی که از ترکیبات قلیایی یا قلیایی خاکی هستند (گروه اول و دوم جدول تناوبی)، شعله را به رنگ‌های مشخصی در می‌آورند. با توجه به این رنگ‌ها، می‌توانیم عناصر موجود در کانی‌ها را تشخیص دهیم.

۳-۲- شناسایی فلزهای قلیایی در یک ترکیب به وسیله‌ی شعله
هدف: شناسایی فلزهای قلیایی از طریق رنگ شعله مواد لازم

- ۱- نمک جامد لیتیم
- ۲- نمک جامد سدیم
- ۳- نمک جامد پتاسیم

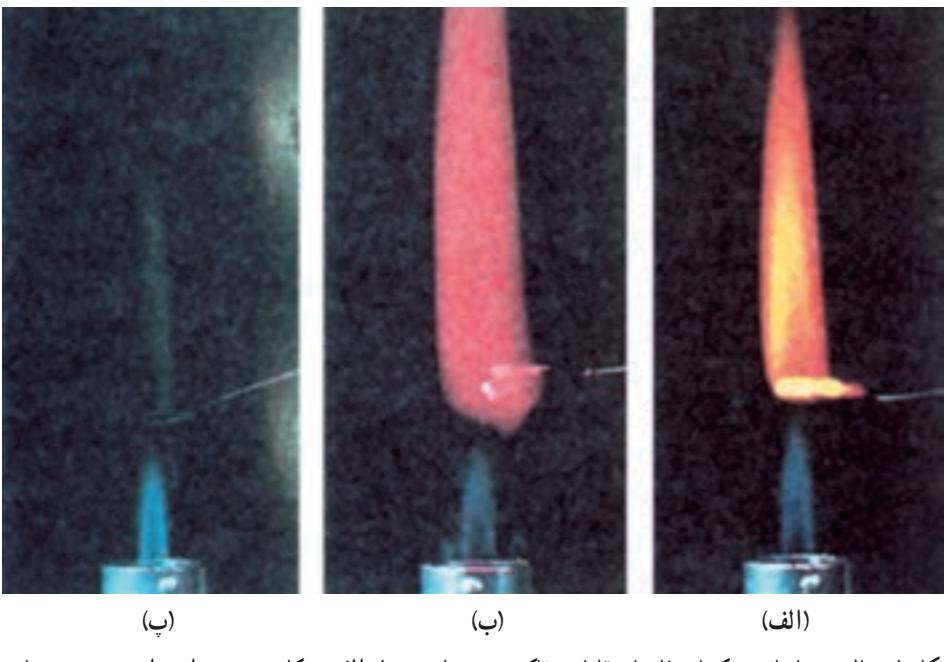

شکل ۱-۲ - شناسایی ترکیبات فلزهای قلیایی خاکی به وسیلهٔ شعله الف - کلسیم، ب - استرانسیم و پ - باریم

مورد آزمایش می‌شوند. برای مثال سدیم که دارای رنگ زرد طلایی می‌باشد، باعث پوشاندن رنگ بنفش پتاسیم، رنگ ارغوانی لیتیم، رنگ قرمز استرانسیم و رنگ نارنجی کلسیم می‌شود. این قبیل اشعه‌ی مزاحم را می‌توان به وسیلهٔ صفحات شیشه‌ای رنگی جذب کرد. مانند یک شیشه‌ای کپالت و یک شیشه‌ی سبز کروم که از عبور اشعه‌ی سدیم جلوگیری می‌کند. در صورتی که سایر شاععه‌ای نورانی از آن عبور می‌کنند، برای این عمل شیشه‌ی رنگی را بین چشم و شعله نگاه می‌دارند. اگر اثر اشعه‌ی مزاحم زیاد باشد می‌توان دو شیشه‌ی رنگی را روی هم قرار داد.

مهم‌ترین عناصری که رنگ شعله را تغییر می‌دهند، به شرح زیر می‌باشند :

شعله‌ی قرمز

ترکیبات لیتیم - قرمز ارغوانی

ترکیبات کلسیم - قرمز نارنجی

ترکیبات استرانسیم - قرمز آتشی

۴-۲- شناسایی فلزهای قلیایی خاکی در یک ترکیب به وسیلهٔ شعله

هدف: شناسایی یک فلز قلیایی خاکی از روی رنگ شعله

مواد لازم

۱- نمک جامد کلسیم

۲- نمک جامد استرانسیم

۳- نمک جامد باریم

۴- نمک جامد منیزیم

ابزار لازم

۱- شیشه‌ی ساعت

۲- میله‌ی پلاتین

۳- چراغ گاز بنسن


۴- قطره چکان

روش کار : مانند روش کار ۳-۲ این آزمایش را مطابق

شکل ۲-۲ انجام دهید و مشاهدات خود را گزارش نمایید.

برخی از ترکیبات فلزی حتی به مقدار کم اگر با جسم

مورد آزمایش مخلوط شده باشند، موجب پوشاندن رنگ فلز

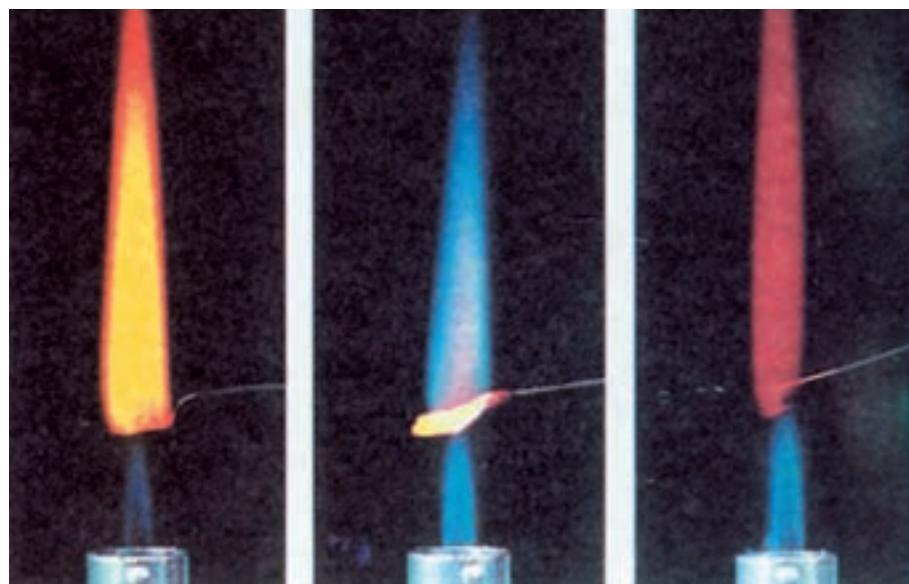

(الف)

(ب)

(پ)

شکل ۲ - رنگ شعله با ترکیبات الف - سدیم، ب - پتاسیم و پ - لیتیم

ترکیبات روی - سبز مایل به آبی

شعله‌ی زرد

شعله‌ی بنفش

ترکیبات پتاسیم - بنفش

ترکیبات سدیم - زرد پر رنگ

شعله‌ی آبی

ترکیبات مس - آبی آسمانی (در صورتی که با HCl

ترکیبات باریم - سبز مایل به زرد

ترکیبات مولیبدن - سبز مایل به زرد

ترکیبات مس - سبز زمردی (بدون مرطوب کردن با HCl) مرطوب شود

ترکیبات آرسنیک - آبی کمنگ

ترکیبات بور - سبز روشن (با استفاده از H_2SO_4)

ترکیبات سرب - آبی کمنگ (کبود)

ترکیبات تلوّر - سبز مایل به آبی کمنگ

ترکیبات آنتیموان - سبز مایل به آبی کمنگ

پرسش و تمرین

۱- چگونه می‌توان مخلوطی از نمک‌های سدیم و پتاسیم را به وسیله‌ی آزمایش شعله شناسایی کرد؟
توضیح دهید.

۲- اگر آب شیر فقط دارای املاح محلول سدیم و کلسیم باشد، چگونه می‌توان یون‌های Na^+ و Ca^{2+} موجود در این آب را شناسایی کرد؟ توضیح دهید.

شناسایی برخی از کاتیون‌ها و آنیون‌های مشهور به‌گمک شناساگر مناسب

هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود، بعد از انجام آزمایش‌های این فصل بتواند :

- ۱- کاتیون‌ها و آنیون‌های مشهور را شناسایی نماید.
- ۲- کاتیون‌ها و آنیون‌ها در نمونه‌ی مجھول شناسایی کند.

در این روش کاتیون‌ها و آنیون‌ها از نظر خواص مشترکی

که بین خود دارند به چند گروه تقسیم می‌شوند. که تجزیه‌ی کیفی شامل تجزیه‌ی گروهی براساس خاصیت مشترک آن گروه و شناسایی تک تک یون‌ها براساس خاصیت شیمیایی هریک از آن‌هاست. در این کتاب به شناسایی کاتیون‌های گروه I و چند آنیون مشهور اکتفا می‌کنیم و تحقیق بیش‌تر در مورد گروه‌های دیگر را به عهده‌ی هنرجویان علاقه‌مند می‌گذاریم.

در اینجا دو هدف داریم : نخست اینکه نشان دهیم، چگونه با استفاده از خواص یون‌های مثبت و منفی می‌توانیم به وجود آن‌ها در محلول بی‌بیریم. دوم اینکه بعضی از واکنش‌های مطرح شده در فصل‌های قبل را مرور کنیم و آن‌ها را به کار بندیم. به عنوان مثال واکنش‌های مربوط به ثابت حاصل ضرب حلالیت و.... .


مطالعه‌ی این واکنش‌ها شما را با برخی از واکنش‌گرهای شیمیایی متداول و خواص آن‌ها آشنا می‌کند.

۲- شناسایی کاتیون‌های گروه I (گروه نقره)
همان طور که می‌دانید، کاتیون‌های این گروه از مجھول عمومی با افزایش محلول HCl جدا می‌شوند. این یون‌ها به صورت کلریدهای AgCl ، PbCl_2 و Hg_2Cl_2 رسوب می‌کنند. آن‌گاه بروی این رسوب باید واکنش انجام داد تا کاتیون‌های آن از یکدیگر جدا و شناسایی شوند.

۱-۳- تجزیه‌ی کیفی^۱
تاکنون با برخی از روش‌های متداول تجزیه‌ی کمی آشنا شده‌اید. در تجزیه‌ی کمی در صدد یافتن مقدار یک جسم معین در یک نمونه بودیم. آنچه که در تجزیه‌ی کمی مطرح بود، تعیین مقدار یا غلظت یک جسم در یک نمونه بود.

در تجزیه‌ی کیفی مسئله‌ی کاملاً تفاوت دارد. در اینجا می‌خواهیم اجزای تشکیل‌دهنده‌ی نمونه را بشناسیم. اگر شما با یک ماده‌ی خالص سرو کار داشته باشید، کار بسیار آسان است تنها کاری که باید انجام دهید، شناسایی آن ماده است. در تجزیه‌ی کیفی، اغلب بروی یک مخلوط کار می‌کنند. در این صورت، همه‌ی اجزای مخلوط را باید جدا و شناسایی کرد. در فصل قبل یکی از روش‌های تجزیه‌ی کیفی (نورسنجی شعله‌ای) مورد بحث قرار گرفت.

در این فصل، روش کار تجزیه‌ی کیفی را در محلول‌های آبی دارای یون‌های مثبت (کاتیون‌ها) و یون‌های منفی (آنیون‌ها) بررسی خواهیم کرد. این نوع تجزیه در یک آزمایشگاه صنعتی، مثلاً در یک کارخانه‌ی صنایع شیمیایی با بررسی خواص فیزیکی این یون‌ها از طریق یک دستگاه انجام می‌شود که در دوره‌ی کارданی یا کارشناسی با این گونه دستگاه‌ها آشنا خواهید شد. اما، در این دوره از درس شیمی تجزیه و در این فصل، بروی روشهای تأکید خواهیم کرد، که به خواص شیمیایی یون‌ها بستگی دارد.

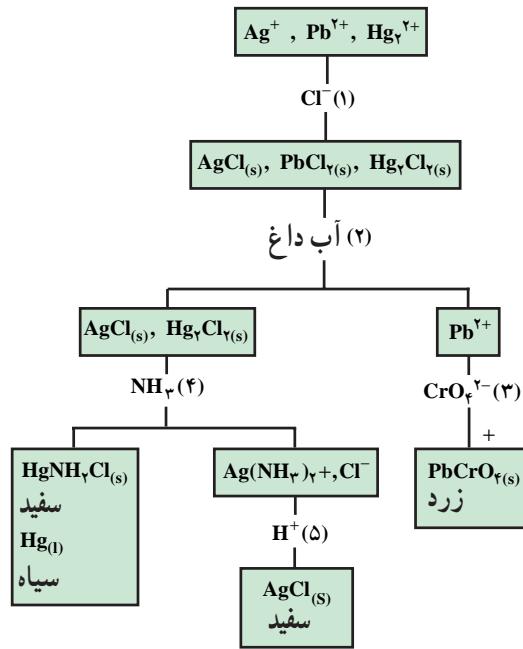

شکل ۱-۳- نگاره‌ی جریان تجزیه‌ی یون‌های مثبت گروه I

محلول Cl^- ۱M٪ بربزید. سپس ۷ تا ۸ قطره محلول ۱٪
 مولار AgNO_3 اضافه کنید. تشکیل رسوبر سفید AgCl
 حضور آینون Cl^- را اعلام می‌کند. این آزمایش را برای وجود
 یون Cl^- در آب شیر آزمایشگاه انجام دهید. جامد تشکیل شده
 کمی در محلول رقیق نیتریک اسید حل می‌شود ولی به طور کامل
 در محلول ۶M٪ NH_3 حل می‌شود. آزمایش کنید و معادلات
 واکنش‌ها را بنویسید.


۲- شناسایی آینون Br^-

روش کار: ۱° قطره از محلول Br^- ۱M٪ را در یک
 لوله‌ی آزمایش بربزید و با ۴ قطره محلول ۳M٪ HNO_3 محلول
 را اسیدی نمایید. سپس ۵ تا ۶ قطره محلول ۱M٪ AgNO_3
 اضافه کنید و به رنگ رسوبر تشکیل شده نگاه کنید. اگر رسوبری
 تشکیل نشد، یون Br^- وجود ندارد اگر رسوبر زرد
 تشکیل شد، وجود یون Br^- اثبات می‌شود. این رسوبر کمی
 در محلول ۳M٪ HNO_3 و کمی در محلول ۶M٪ NH_3 حل می‌شود.
 معادلات واکنش‌ها را بنویسید.


۳- شناسایی آینون I^-

روش کار: برای شناسایی آینون I^- مانند دستور کار
 شناسایی Br^- عمل کنید. رسوبر زرد کمرنگ AgI که در



نخستین مرحله، گرم کردن رسوبر با آب داغ است. تنها
 PbCl_2 در آب داغ محلول است.

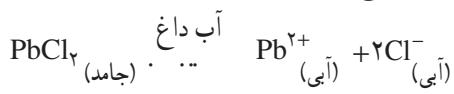


به این ترتیب کاتیون Pb^{2+} از دو کاتیون دیگر جدا شده
 وارد محلول می‌شود. به محلول داغ یون کرومات، CrO_4^{2-} اضافه می‌کنیم. تشکیل رسوبر زرد PbCrO_4 حضور یون‌های Pb^{2+} را تأیید می‌کند.

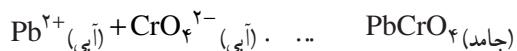

حالا رسوبر دارای کلریدهای AgCl و Hg_2Cl_2 می‌باشد. رسوبر را تحت اثر محلول NH_3 ۶M قرار می‌دهیم.
 رسوبر AgCl با تشکیل کمپلکس در آمونیاک حل می‌شود.
 اما رسوبر Hg_2Cl_2 در NH_3 دو ماده‌ی نامحلول تشکیل
 می‌دهد، یکی HgNH_4Cl و دیگری Hg .

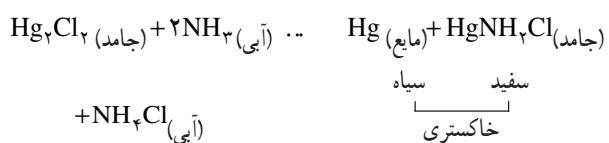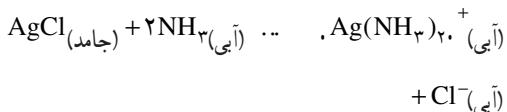

برای بی بردن به حضور کاتیون Ag^+ به محلول کمپلکس
 اسید اضافه می‌کنیم. در این صورت یون کمپلکس می‌شکند و
 مجدداً AgCl رسوبر می‌کنند.

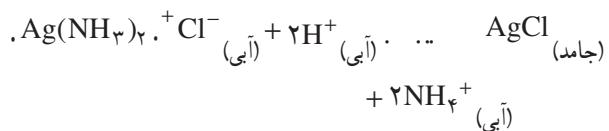


به نگاره‌ی جریان تجزیه‌ی کیفی کاتیون‌های گروه I در شکل
 ۱- توجه نمایید.

۳- شناسایی آینون‌ها (یون‌های منفی)

۱- شناسایی آینون Cl^-


روش کار: در یک لوله‌ی آزمایش $\frac{1}{2} \text{ mL}$ (۱° قطره)

اسیدی کنید. ۳ تا ۴ قطره محلول آمونیوم مولیبدات اضافه نمایید. خوب هم بزنید اگر لازم باشد برای مدت ۲ دقیقه در یک بنماری حرارت دهید. تشکیل رسوب زرد آمونیم فسفومولیبدات وجود یون فسفات را اثبات می‌کند.

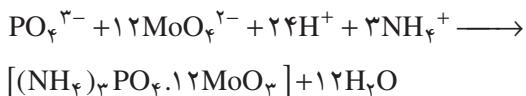

۸- شناسایی آنیون نیترات، NO_3^-

روش کار: در یک لوله‌ی آزمایش ۵ قطره محلول $18\text{M H}_2\text{SO}_4$ و 10M NO_3^- بزنید، سپس ۱۰ قطره محلول 1M FeSO_4 به آن اضافه کنید. کاملاً هم بزنید و لوله‌ی آزمایش را سرد کنید. به دقت ۶ تا ۸ قطره محلول (تازه تهیه شده) 10M BaSO_4 بیفزاید. بگذارید که محلول Fe^{3+} در بالای محلول اسیدی شناور گردد. مدت ۱ تا ۲ دقیقه بماند. رنگ قهوه‌ای که در ناحیه ارتباط دو لایه تشکیل می‌شود، به دلیل تشکیل یون کمپلکس آهن (II) نیتروزیل به فرمول $\text{Fe}(\text{NO})^{2+}$ وجود یون نیترات را ثابت می‌کند.

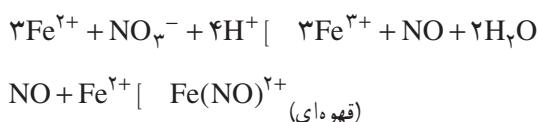

۹- شناسایی چند کاتیون و آنیون مجهول

مواد لازم

۱- محلول‌های مجهول با یک، دو یا سه کاتیون

۲- محلول‌های مجهول با یک یا دو آنیون

۳- شناساگرهای اسید- باز

ابزار لازم

۱- لوله‌ی آزمایش معمولی

۲- لوله‌ی سانتریفیوز

۳- دستگاه سانتریفیوز

۴- بن‌ماری

۵- قطره چکان

نیتریک اسید و آمونیاک نامحلول است تشکیل می‌شود. آزمایش کنید و معادله‌ی واکنش را بنویسید.

۴- شناسایی آنیون سولفات، SO_4^{2-}

روش کار: در یک لوله‌ی آزمایش کمی از Na_2SO_4 جامد را در 1mL آب مقطر حل کنید یا $\frac{1}{2}\text{mL}$ محلول $10\text{M Na}_2\text{SO}_4$ در یک لوله‌ی آزمایش بزنید. سپس ۱۰ قطره محلول 10M BaSO_4 اضافه کنید. رسوب سفید BaSO_4 که تشکیل می‌شود، وجود آنیون SO_4^{2-} را اثبات می‌کند. این رسوب بسیار کم در محلول رقیق 3M HNO_3 حل می‌شود. معادلات واکنش‌ها را بنویسید.

۵- شناسایی آنیون سولفات، SO_4^{2-}

روش کار: مانند روشن کار ۴، $\frac{1}{2}\text{mL}$ محلول 10M SO_4^{2-} در یک لوله‌ی آزمایش بزنید. سپس ۱۰ قطره محلول 10M BaSO_4 بیفزاید. رسوب سفید BaSO_4 که تشکیل می‌شود به آن ۵ قطره محلول 3M HNO_3 اضافه کنید. و کاغذ آغشته به محلول پتابسیم پرمنگات حضور SO_4^{2-} را اعلام می‌نماید و وجود SO_4^{2-} حضور یون سولفات، SO_4^{2-} را اثبات می‌کند. معادلات واکنش‌ها را بنویسید.

۶- شناسایی آنیون کربنات، CO_3^{2-}

روش کار: در یک لوله‌ی آزمایش $\frac{1}{2}\text{mL}$ محلول 10M CO_2 بزنید. سپس ۱۰ قطره محلول 10M BaCO_3 وجود آنیون CO_3^{2-} را اثبات می‌کند. به رسوب درون لوله‌ی آزمایش 5M HNO_3 بیفزاید و فوری گاز CO_2 حاصل را به درون لوله‌ی آزمایش دارای محلول $\text{Ca}(\text{OH})_2$ هدایت کنید. تشکیل رسوب سفید کلسیم کربنات وجود گاز CO_2 را تأیید می‌کند و حضور گاز CO_2 وجود یون کربنات را در محلول اولیه اثبات می‌کند. معادلات واکنش‌ها را بنویسید.

۷- شناسایی آنیون فسفات، PO_4^{3-}

روش کار: $\frac{1}{2}\text{mL}$ محلول 1M مولار یون فسفات را در یک لوله‌ی آزمایش بزنید. با ۴ قطره محلول 3M HNO_3



شکل ۳-۲

روش کار: محلول مجهولی در اختیار شما قرار می‌گیرد، کاتیون‌های آن را با نوجه به روش کار داده شده شناسایی کنید. در هر مرحله برای جدا کردن رسوب ازبقیه‌ی محلول، می‌توانید از دستگاه سانتریفیوژ استفاده کنید.

پرسش و تمرین

- ۱- برنج آلیاژی است از مس و روی، اگر آن را در نیتریک اسید گرم کنیم گرم حل می‌شود. انتظار دارید که در محلول به دست آمده چه یون‌هایی موجود باشد؟
- ۲- معادلات موازن‌شده‌ی واکنش‌های زیر را بنویسید.



- ۳- رسوبی از گروه I در آب داغ کاملاً محلول است. کدام یون‌ها در محلول وجود دارد؟ کدام یون‌ها در محلول وجود ندارد؟

۴- چگونه می‌توان Cl^- را از I^- تشخیص داد؟ معادلات واکنش‌ها را بنویسید.

۵- خاصیت مشترک کاتیون‌های گروه I چیست؟

۶- بیان کنید هریک از جداسازی‌های زیر بر چه اساسی قرار دارد؟

(الف) جدا کردن یون‌های Pb^{2+} از یون‌های نقره و جیوه (I)

(ب) جدا کردن یون‌های نقره از یون‌های جیوه (I)

۷- از مقایسه K_{SP} نمک‌های AgCl و AgI چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

فعالیت

در مورد گروه‌های دیگر یون‌ها تحقیق کنید. سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید:

۱- هرگاه محلول آمونیاک به محلول Mg^{2+} اضافه شود، رسوب تشکیل خواهد شد.

(الف) فرمول آن رسوب را بنویسید.

(ب) یون‌های منفی از کجا به دست می‌آیند؟

۲- برای تشخیص یون NH_4^+ چه آزمایشی باید انجام داد؟

۳- ترکیبات زیر را چگونه تشخیص می‌دهید؟

(الف) $Al(OH)_3$ ، $AlCl_3$

(ب) $Zn(OH)_2$ ، $Al(OH)_3$

(ج) $ZnCl_2$ ، $MgCl_2$

(د) $Cu(OH)_2$ ، CuS

۴- چگونه می‌توان مخلوط $CaCl_2$ و $MgCl_2$ را از یکدیگر جدا نمود؟ معادلات واکنش‌ها را بنویسید.